
AKED Femurschaft-Extraktor

Entfernung des Femurschafts bei der Hüftrevision

Bei Hüftrevisionen kommt dieses Set nach Entfernung des Prothesenkopfes zum Einsatz, um den Femurschaft zu lösen. Ein Backenextraktor greift den Konus des Implantats, anschließend übernimmt ein Standardhammer mit schwenkbarem Gleitgewicht die Extraktion.

Laut Hersteller eignet er sich für alle Schäfte mit Hals für einen modularen Kopf, unabhängig vom Modell. Entwickelt und hergestellt in Frankreich von AKED, wird er von Medfirst unter der Referenz 0081 01 00 vertrieben.

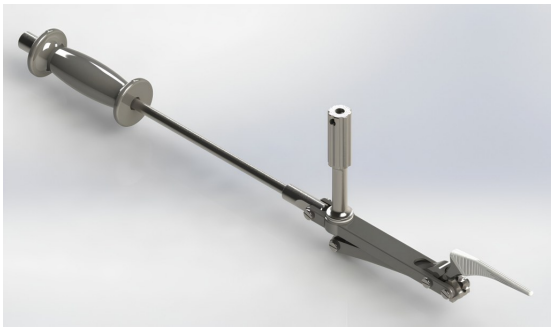

Technische Daten

Referenz	0081 01 00
Zusammensetzung	Femurschaft-Extraktor und Standardhammer mit Gleitgewicht
Materialien	Edelstahl, Polyethylenring
Gesamtabmessungen	65 × 12 × 6 cm
Verwendung	Wiederverwendbar, unsteril geliefert
UDI	03700751501944
Herkunft	Frankreich

Verpackung und Sterilisation

Das Set wird unsteril in einer etikettierten Einzelverpackung aus Kunststofffolie geliefert, die Gebrauchsanweisung liegt im Beutel. Als wiederverwendbares Instrument wird es nach den Reinigungs- und Sterilisationsverfahren der Einrichtung und gemäß dieser Gebrauchsanweisung aufbereitet.

CE-Kennzeichnung

Medizinprodukt der Klasse I mit CE-Kennzeichnung, für das eine EU-Konformitätserklärung nach Anhang IV der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) vorliegt. GMDN-Code 12696 und EMDN-Code L091101 (wiederverwendbare Instrumente zur Entfernung orthopädischer Prothesen).

ABenötigen Sie Hilfe oder weitere Informationen?

8 esplanade Compans Caffarelli - 31000 TOULOUSE, France
Email : ventes@medfirst.care

V1.0 - 10/11/2026

Anwendung in vier Schritten






1

Ansetzen

Nach Entfernung des Kopfes werden die Backen des Extraktors um den Schaftkonus gelegt.

2

Verriegeln

Der Griff wird von Hand angezogen, bis der Konus zwischen den Backen festsitzt. Das Instrument ist dann fest mit dem Implantat verbunden.

3

Achse einstellen

Der Hammer wird in den Gabelkopf des Extraktors geschraubt, der in die gewünschte Extraktionsrichtung ausgerichtet wird.

4

Extraktion

Die Schläge mit dem Gleitgewicht lösen den Femurschaft schrittweise.

Häufig gestellte Fragen

Mit welchen Schäften ist er kompatibel?

Laut Hersteller mit allen Schäften mit Hals für einen modularen Kopf.

Was ist ein Gleithammer?

Ein Hammer, dessen Gewicht entlang der Stange gleitet. Die Bewegung des Gewichts erzeugt Zugimpulse, die auf den Extraktor und dann auf den Schaft übertragen werden.

Ist er steril oder zum Einmalgebrauch?

Nein. Er ist wiederverwendbar und wird unsteril geliefert, die Aufbereitung erfolgt gemäß der Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Für weitere Entfernungen vertreibt Medfirst auch ein universelles Nagelentfernungskit und ein Set zur Entfernung gebrochener Schrauben.

ABenötigen Sie Hilfe oder weitere Informationen?

8 esplanade Compans Caffarelli - 31000 TOULOUSE, France
Email : ventes@medfirst.care

V1.0 - 10/11/2026