
Extractor de vástago femoral AKED

Retirada del vástago femoral en la revisión de cadera

En la cirugía de revisión de cadera, este conjunto se utiliza una vez retirada la cabeza protésica, para liberar el vástago femoral. Un extractor de mordazas sujeta el cono del implante y, a continuación, un martillo estándar con masa deslizante orientable realiza la extracción.

El fabricante lo destina a los vástagos con cuello para cabeza modular, sea cual sea el modelo. Diseñado y fabricado en Francia por AKED, Medfirst lo distribuye con la referencia 0081 01 00.

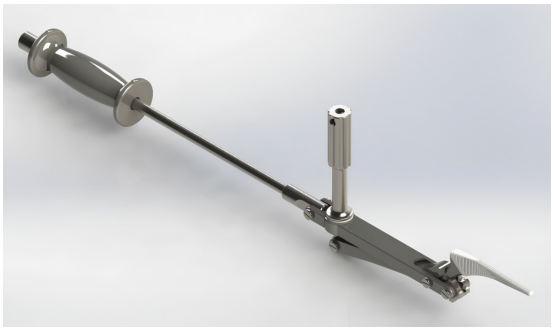

Características técnicas

Referencia	0081 01 00
Composición	Extractor de vástago femoral y martillo estándar de masa deslizante
Materiales	Acero inoxidable, anillo de polietileno
Dimensiones totales	65 × 12 × 6 cm
Uso	Reutilizable, suministrado no estéril
UDI	03700751501944
Origen	Francia

Envase y esterilización

El conjunto se entrega no estéril, en un envase individual de film plástico etiquetado, con las instrucciones de uso dentro de la bolsa. Al ser un instrumento reutilizable, se reprocesa según los procedimientos de limpieza y esterilización del centro, de acuerdo con dichas instrucciones.

Marcado CE

Producto sanitario de clase I con marcado CE, objeto de una declaración UE de conformidad según el anexo IV del Reglamento (UE) 2017/745 (MDR). Códigos GMDN 12696 y EMDN L091101 (instrumentos reutilizables de extracción de prótesis ortopédicas).

¿Necesita ayuda
o información adicional?

8 esplanade Compans Caffarelli - 31000 TOULOUSE, France
Email : ventes@medfirst.care

V1.0 - 10/11/2026

Colocación en cuatro pasos






1 — 2 — 3 — 4

Colocación

Una vez retirada la cabeza, las mordazas del extractor se sitúan alrededor del cono del vástago.

Bloqueo

La empuñadura se aprieta a mano hasta inmovilizar el cono entre las mordazas, de modo que el instrumento queda solidario con el implante.

Ajuste del eje

El martillo se enrosca en la horquilla del extractor, que se orienta según la dirección de extracción elegida.

Extracción

Los impactos dados con la masa deslizante liberan progresivamente el vástago femoral.

Preguntas frecuentes

¿Con qué vástagos es compatible?

Según el fabricante, con todos los vástagos con cuello para cabeza modular.

¿Qué es un martillo deslizante?

Un martillo cuya masa se desliza a lo largo de su eje. Su desplazamiento genera los impactos de tracción que se transmiten al extractor y, después, al vástago.

¿Es estéril o de un solo uso?

No. Es reutilizable y se suministra no estéril; debe reprocesarse según las instrucciones del fabricante.

Para otras extracciones, Medfirst distribuye también un kit universal de extracción de clavos y un kit de extracción de tornillos rotos.

¿Necesita ayuda
o información adicional?

8 esplanade Compans Caffarelli - 31000 TOULOUSE, France
Email : ventes@medfirst.care

V1.0 - 10/11/2026