
Extracteur de tige fémorale AKED

Retrait de la tige fémorale en reprise de hanche

En reprise de hanche, cet ensemble intervient une fois la tête prothétique déposée, pour dégager la tige fémorale. Un extracteur à mâchoires vient saisir le cône de l'implant, puis un marteau standard équipé d'une masselotte coulissante orientable assure l'extraction.

Le fabricant le destine aux tiges munies d'un col à tête modulaire, quel que soit leur modèle. Conçu et fabriqué en France par AKED, il est distribué par Medfirst sous la référence 0081 01 00.

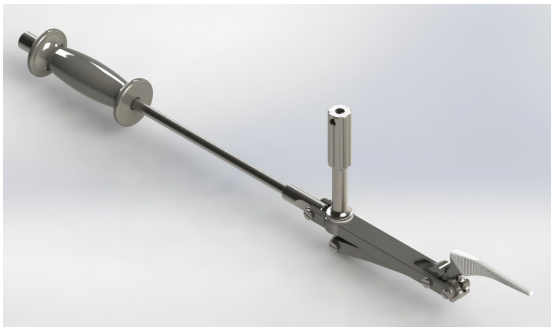

Caractéristiques techniques

Référence	0081 01 00
Composition	Extracteur de tige fémorale et marteau standard à masselotte coulissante
Matériaux	Acier inoxydable, anneau en polyéthylène
Dimensions globales	65 × 12 × 6 cm
Utilisation	Réutilisable, fourni non stérile
IUD	03700751501944
Origine	France

Conditionnement et stérilisation

L'ensemble est livré non stérile, dans un emballage individuel en film plastique étiqueté, avec la notice d'instruction dans le sachet. Instrument réutilisable, il est retraité selon les procédures de nettoyage et de stérilisation de l'établissement, conformément à cette notice.

Marquage CE

Dispositif médical de classe I marqué CE, qui fait l'objet d'une déclaration UE de conformité selon l'annexe IV du règlement (UE) 2017/745. Codes GMDN 12696 et EMDN L091101 (instruments d'ablation de prothèses orthopédiques, réutilisables).

Besoin d'aide
ou d'infos complémentaires ?

8 esplanade Compans Caffarelli - 31000 TOULOUSE, France
Email : ventes@medfirst.care

V1.0 - 05/11/2026

Mise en place en quatre étapes









1

Mise en place

Une fois la tête retirée, les mâchoires de l'extracteur sont présentées autour du cône de la tige.

2

Verrouillage

La poignée se resserre à la main jusqu'à bloquer le cône entre les mâchoires, ce qui rend l'instrument solidaire de l'implant.

3

Réglage de l'axe

Le marteau se visse sur la chape de l'extracteur, que l'on oriente selon la direction d'extraction choisie.

4

Extraction

Les impacts donnés avec la masselotte coulissante dégagent progressivement la tige fémorale.

Questions fréquentes

Avec quelles tiges est-il compatible ?

Selon le fabricant, avec toutes les tiges munies d'un col à tête modulaire.

Qu'est-ce qu'une masselotte ?

C'est la masse qui coulisse le long du marteau. Son déplacement génère les impacts de traction transmis à l'extracteur, puis à la tige.

Est-il stérile ou à usage unique ?

Non. Il est réutilisable et fourni non stérile, à retraiter selon la notice du fabricant.

Pour les reprises de hanche, Medfirst distribue aussi l'EndoDriver Endocon et le kit d'extraction de cotyle Spierings.

Besoin d'aide
ou d'infos complémentaires ?

8 esplanade Compans Caffarelli - 31000 TOULOUSE, France
Email : ventes@medfirst.care

V1.0 - 05/11/2026