
Estrattore di stelo femorale AKED

Rimozione dello stelo femorale nella revisione d'anca

Nella chirurgia di revisione dell'anca, questo set interviene una volta rimossa la testa protesica, per liberare lo stelo femorale. Un estrattore a ganasce afferra il cono dell'impianto, poi un martello standard dotato di massa scorrevole orientabile esegue l'estrazione.

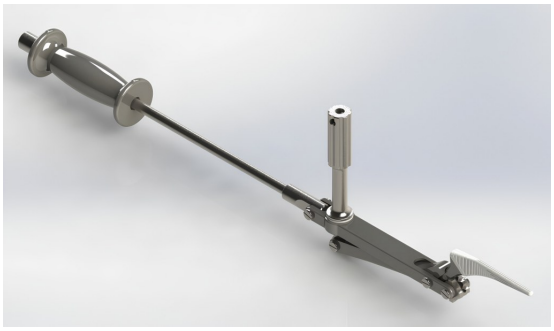

Il produttore lo destina agli steli dotati di collo per testa modulare, qualunque sia il modello. Progettato e prodotto in Francia da AKED, è distribuito da Medfirst con il codice 0081 01 00.

Caratteristiche tecniche

Codice	0081 01 00
Composizione	Estrattore di stelo femorale e martello standard a massa scorrevole
Materiali	Acciaio inossidabile, anello in polietilene
Dimensioni complessive	65 × 12 × 6 cm
Utilizzo	Riutilizzabile, fornito non sterile
UDI	03700751501944
Origine	Francia

Confezionamento e sterilizzazione

Il set è consegnato non sterile, in una confezione individuale in film plastico etichettata, con le istruzioni per l'uso all'interno della busta. Trattandosi di uno strumento riutilizzabile, viene ricondizionato secondo le procedure di pulizia e sterilizzazione della struttura, in conformità con tali istruzioni.

Marcatura CE

Dispositivo medico di classe I con marcatura CE, oggetto di una dichiarazione UE di conformità ai sensi dell'allegato IV del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR). Codici GMDN 12696 ed EMDN L091101 (strumenti riutilizzabili per l'estrazione di protesi ortopediche).

Avete bisogno di assistenza o di ulteriori informazioni?

8 esplanade Compans Caffarelli - 31000 TOULOUSE, France
Email : ventes@medfirst.care

V1.0 - 10/11/2026

Posizionamento in quattro fasi






1

Posizionamento

Rimossa la testa, le ganasce dell'estrattore vengono collocate attorno al cono dello stelo.

2

Bloccaggio

L'impugnatura si stringe a mano fino a bloccare il cono tra le ganasce, rendendo lo strumento solidale con l'impianto.

3

Regolazione dell'asse

Il martello si avvita sulla forcella dell'estrattore, orientata secondo la direzione di estrazione scelta.

4

Estrazione

I colpi dati con la massa scorrevole liberano progressivamente lo stelo femorale.

Domande frequenti

Con quali steli è compatibile?

Secondo il produttore, con tutti gli steli dotati di collo per testa modulare.

Che cos'è una massa battente?

È la massa che scorre lungo l'asta del martello. Il suo spostamento genera gli impulsi di trazione trasmessi all'estrattore e poi allo stelo.

È sterile o monouso?

No. È riutilizzabile e fornito non sterile, da ricondizionare secondo le istruzioni del produttore.

Per altre rimozioni, Medfirst distribuisce anche un kit universale per la rimozione dei chiodi e un kit per l'estrazione delle viti rotte.

Avete bisogno di assistenza o di ulteriori informazioni?

8 esplanade Compans Caffarelli - 31000 TOULOUSE, France
Email : ventes@medfirst.care

V1.0 - 10/11/2026